



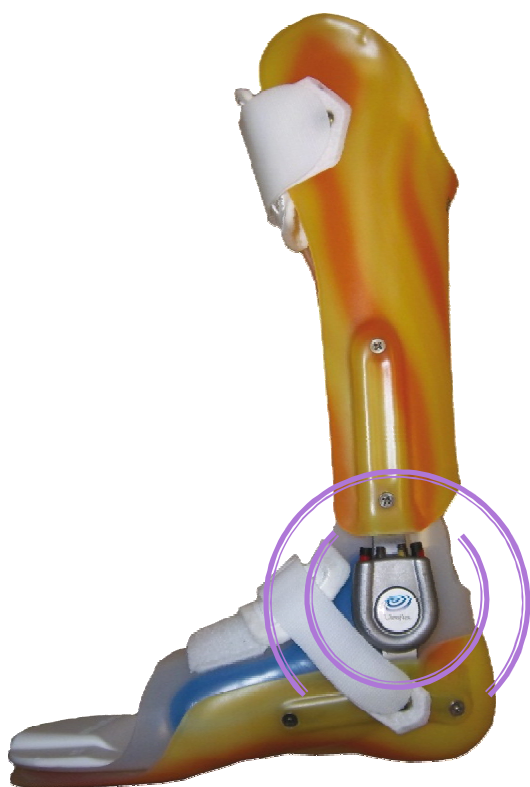

**Optimaliser la qualité
de la marche tout en
diminuant la dépense
d'énergie de votre
patient**

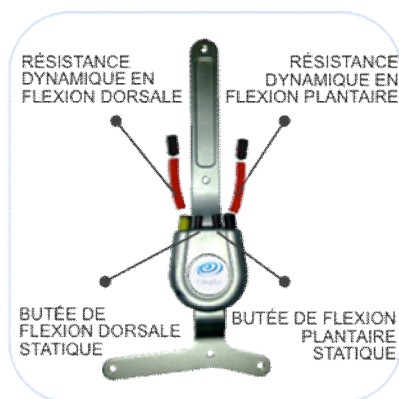

RÉSISTANCE DYNAMIQUE AJUSTABLE (RDA™) POUR LA CHEVILLE EN PHASE D'APPUI INITIAL ET FINAL

INDICATIONS

Améliorer la marche pendant et après la rééducation suite à une AVC (programme d'utilisation forcée du membre).

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

Modèle de réaction au sol

- Amortit la force de réaction au sol pour une marche plus souple et plus efficace.
- Redirige la force de réaction au sol vers l'avant lors du contact initial avec le sol.
- Autres modèles possibles.

Amplitude de mouvement réglable

- Amplitude de flexion dorsale et plantaire allant de 0 à 40°.

Résistance dynamique à double réglage pour l'appui.

- Résistance réglable lors du contact initial et en fin d'appui.
- Comme l'on tient d'avantage compte des principes biomécaniques dans ce modèle, il permet un plus grand mouvement de la cheville tout en accumulant et en libérant de l'énergie.
- Amortissement réglable de la compensation musculaire : couple de rotation jusqu'à 68 Nm

Empêche les orteils de traîner sur le sol

- Assure un retour de la cheville en position neutre et aide au dégagement du pied pendant le balancement.
- Améliore le contact initial, stabilise l'ensemble de la cheville et avance le corps au milieu de la phase d'appui.

Transfert de la force de réaction au sol

- Les doubles étriers latéraux et médiaux soutiennent la partie moyenne du pied et transfèrent la force de réaction au sol aux fléchisseurs dorsaux des orteils.